

TERAPIA CHIRURGICA



PROTESI PENIENE

PROTESI MALLEABILI

semirigide, non gonfiabili, non idrauliche

PROTESI GONFIABILI

idrauliche

Bi-componenti

Tri-componenti

PROTESI PENIENE

PROTESI MALLEABILI

Capsula esterna e nucleo centrale di metallo o plastica

vantaggi

minor costo

maggiore semplicità dell'intervento

rarietà dei guasti meccanici

facilità di utilizzo

svantaggi

atteggiamento innaturale del pene

possibile disagio in condizioni particolari

difficoltà in corso di procedure endoscopiche

PROTESI PENIENE MALLEABILI

ESKA Jonas Silicon-Silver* Penile Prosthesis



This range of high quality penile prostheses for surgical resolution of the problem of organic impotence is now available exclusively from **Bard**.

Each prosthesis consists of a pair of implants for insertion into the corpora cavernosa.

All implants in the range have a core of braided silver wires, each wire being individually sheathed in Teflon[®] to minimise fracture. The wire bundle is further Teflon coated in its entirety and encapsulated in high-grade silicone to ensure optimum long-term compatibility with penile tissue.

These implants have been shown to withstand well over a million flexes between the retraction and corpus positions.

Trimming Tip Version
The most widely accepted version, illustrated here, has a Trimming Tip marked with 1cm increments at the proximal end. Presented in 4 basic sizes, each size offers a choice of four lengths. The total of 16 variations, between 16cm and 25cm in length and 8-11mm or 11-13mm in diameter, covers most individual requirements.

ESKA

BARD

Standard Version
Available in four different lengths from 16cm to 25cm and three different diameters 8mm, 11mm and 13mm. The complete range of 22 variations may be ordered by name.

Variable Version
Individual variations available to be ordered only where experienced and specially performed. Components: 1 pair of implants, 7cm or 8cm proximal, plus 1 pair of silicone covers. Length based on standard diameter of either 8-11mm or 11-13mm. Provide one pair of marks between 8 and 10cm in length.

See the exact prosthesis length
Trimmed from each side to measure the distal and proximal positions of the silicone sheath, from the tip of the penis.

The sum of the two measurements gives the exact implant length required. Available in 22cm and 23cm lengths.

Encapsulated
Encapsulated models with varying curved implant and individual penile diameters. The proximal end of the model covers a range of 8 to 11cm. The proximal end of the model is 7cm. Available in 22cm and 23cm lengths.

ESKA

BARD

Manufactured in West Germany by Keller-Kratos GmbH, D-6200 Castellum/Main

Ordering Information

Category	Diameter (mm)	Length (cm)	Pair/Each	Code
Standard Version	8.5	16	Pair	45.05.16
	8.5	17	Pair	45.05.17
	8.5	18	Pair	45.05.18
	8.5	19	Pair	45.05.19
	8.5	20	Pair	45.05.20
	8.5	21	Pair	45.05.21
	8.5	22	Pair	45.05.22
	11	16	Pair	45.11.16
	11	17	Pair	45.11.17
	11	20	Pair	45.11.20
	11	21	Pair	45.11.21
	11	22	Pair	45.11.22
	11	23	Pair	45.11.23
	11	24	Pair	45.11.24
	13	16	Pair	45.13.16
	13	18	Pair	45.13.18
13	20	Pair	45.13.20	
13	21	Pair	45.13.21	
13	22	Pair	45.13.22	
13	24	Pair	45.13.24	
13	25	Pair	45.13.25	
Trimming Tip Version	8-11	16-18	Pair	45.00.01
	8-11	20-23	Pair	45.00.02
	11-13	16-21	Pair	45.00.03
	13-25	20-25	Pair	45.00.07
Variable Version Prostheses			Pair	45.00.11
Variable Version Cover	10-12	11	Pair	45.00.12
12-14	12	Pair	45.00.13	
See	22	Each	45.06.02	
28	Each	45.06.03		
Encapsulated			Pair	38.25.28

Please consult product labels and inserts for any indications, contraindications, warnings, cautions and directions for use. Please call 80006 07 0000, 02 312000. Please e-mail: URO@BARD.COM

Bard Limited
Parsippany Industrial Estate
Cedarhurst Drive, NJ 07004, USA
Telephone (USA) 1-201-349-7000
Telex 033700

INVASIVE TREATMENT

Dura-II™
Protesi Peniena Posizionabile



INTRODUCING UROHEALTH INTERNATIONAL

SOLUTIONS FOR IMPOTENCE...QUALITY FOR LIFE



PROTESI PENIENE MALLEABILI

O M N I



They shouldn't have to choose between natural appearance and ease of operation.

OmniPhase gives them both.

- Unique design provides natural flaccid appearance.
- Simple activation mechanism provides patients with the ability to gain rigidity or flaccidity with one simple motion.
- No difficult pumping required.
- Superior, non-buckling rigidity.
- Only 2 pair necessary for complete inventory.
- 5-year warranty, one of the strongest in the industry.
- High-tech design continuously refined for even better performance.
- Simple surgical procedure.

H A S E



DACOMED
From Testing to Treatment

PROTESI PENIENE

PROTESI GONFIABILI


Bi-componenti

Due cilindri appaiati contenenti del liquido nella porzione basale, trasferito nella porzione centrale in stato di attivazione

Gli ultimi due cm distali sono costituiti da silicone compatto

Cilindri preconnessi con pompa sferica impiantata nello scroto

Piegando il sistema a metà asta si induce il deflusso del liquido nel segmento basale

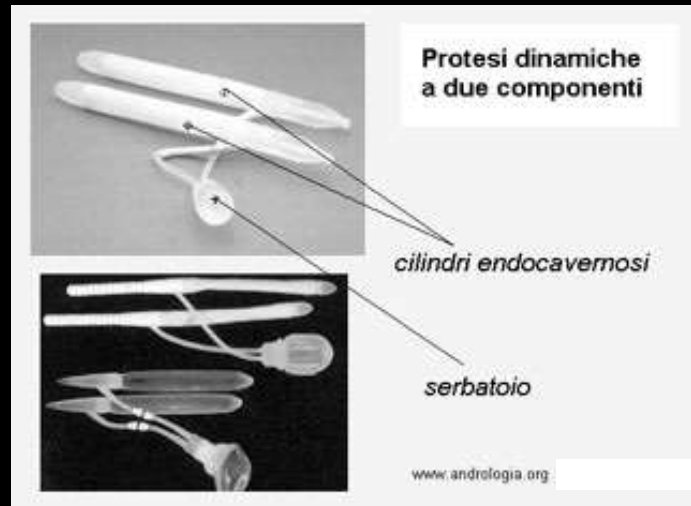


PROTESI PENIENE

PROTESI GONFIABILI

Tri-componenti

Cilindri appaiati

Capiante serbatoio di liquido (Piccola pompa scrotale
retropubica)

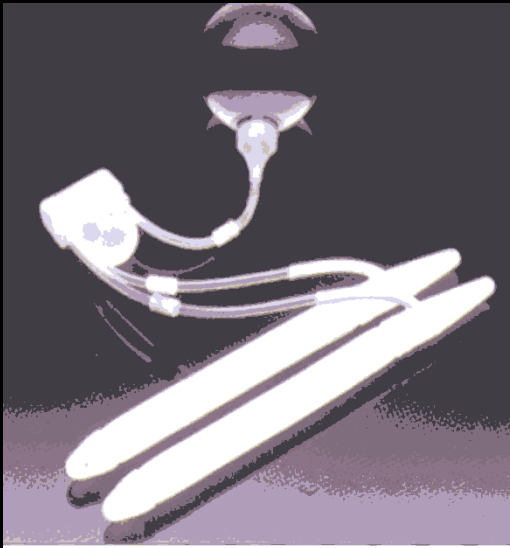

PROTESI PENIENE

PROTESI GONFIABILI

vantaggi

buona simulazione della flaccidità/erezione
minore intralcio in corso di procedure endoscopiche
minore decubito che i cilindri esercitano

svantaggi

costi + elevati
maggiore complessità dell'impianto
maggiore frequenza guasti meccanici
necessità di una maggiore manualità

PROTESI PENIENE

COMPLICANZE

Infezioni perioperatorie

Dolenza persistente al pene

Estrusione protesica

Ptosi del glande sull'apice dei corpi cavernosi

Dilatazione aneurismatica dei corpi cavernosi

Guasti meccanici

